


MASAJEADOR TÉRMICO INFRARROJO PARA PIES

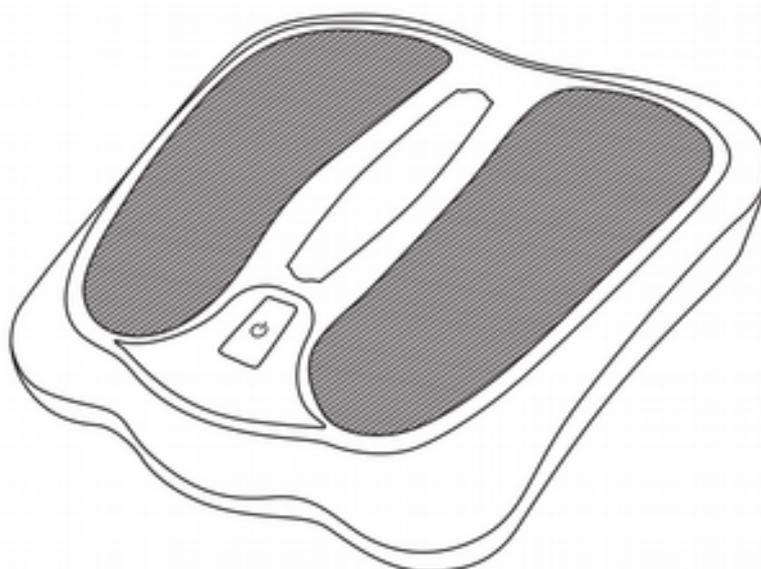

MANUAL DE USO

CE

Querido cliente,

Le agradecemos su elección por los productos Top Life. Nuestra filosofía es ofrecer productos que mejoren la salud y el bienestar en el día a día.

Lea con atención estas instrucciones; guarde el manual para su uso posterior, póngalo a disposición de otros usuarios y siga las instrucciones.

Saludos cordiales
El Equipo Top Life



Advertencia

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, también por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con poca experiencia o conocimientos, siempre y cuando estén vigilados o se les indique cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos.
- Los niños no deben jugar nunca con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
- El cable de alimentación eléctrica de este aparato no puede ser reemplazado. Si el cable se daña, el aparato deberá ser desechado.
- No introduzca objetos en los orificios del aparato ni en las piezas móviles. Asegúrese de que las piezas móviles se puedan mover libremente.
- No introduzca ninguna parte de su cuerpo (en particular los dedos) entre las piezas móviles del masajeador o su soporte.

1. Contenido

- Masajeador Shiatsu para los pies
- Manual de uso (versión 1)

Índice

- 1. Contenido**
- 2. Explicación de los símbolos**
- 3. Acerca del masaje shiatsu**
- 4. Conociendo el producto**
- 5. Uso correcto**
- 6. Instrucciones de seguridad**
- 7. Descripción del aparato**
- 8. Puesta en servicio**
- 9. Utilización**
- 10. Cuidados y almacenamiento**
- 11. ¿Qué hacer en caso de algún problema?**
- 12. Eliminación**

2. Explicación de los símbolos

 El aparato tiene un doble aislamiento de protección, cumpliendo así con la Clase de protección 2. Cumple con las directivas de la UE RoHS 2.0 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU y LVD 2014/35/EU.

3. Acerca del masaje shiatsu

El Shiatsu es una forma de masaje corporal, desarrollada en Japón hace unos 100 años, que se basa en conceptos de la medicina tradicional china. Su principio es el sistema de canales de energía (sistema de meridianos) en el cuerpo humano.

El objetivo de un masaje Shiatsu es favorecer el bienestar físico, emocional y mental de la persona tratada.

4. Conociendo el producto

El masajeador Shiatsu posee 18 cabezales de masaje rotativos que imitan los movimientos de un masaje Shiatsu.

Este aparato está destinado exclusivamente para el uso personal, no para la aplicación médica ni comercial.

5. Uso correcto

Este aparato está destinado al masaje de pies. No utilice este aparato de masaje si tiene dudas con respecto a una o varias de las siguientes advertencias. Si no está seguro de que este aparato de masaje pueda ser apropiado para usted, consúltelo con su médico.

6. Instrucciones de seguridad

No utilice el aparato:

- ☐ en caso de alteraciones patológicas o lesiones de los pies (p. ej. heridas abiertas, verrugas, infecciones por hongos),
- ☐ con niños,
- ☐ con animales,
- ☐ **durante más de 15 minutos (ver capítulo 9)**

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidad físicas, sensoriales o mentales limitadas, o que carezcan de la experiencia y conocimiento necesario, salvo que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o que recibiesen instrucciones de la misma en cuanto al uso del aparato.

Nunca utilice el aparato sin supervisión. Los niños deben estar supervisados en todo momento y no deben jugar con el aparato.

Antes de utilizar el masajeador consulte a su médico:

- si no está seguro de que el aparato sea apropiado para usted,
- si padece una enfermedad grave o le han practicado una intervención quirúrgica en el pie,
- en caso de diabetes o trombosis,
- en caso de dolor en la pierna y el pie (p. ej., varices, flebitis),
- en caso de padecer dolores de causa desconocida.

El aparato está destinado exclusivamente a la finalidad descrita en este manual de instrucciones. El fabricante no asumirá la responsabilidad por daños y perjuicios causados por un uso irresponsable o incorrecto.



ADVERTENCIA

Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Hay riesgo de asfixia.



Electrocución ADVERTENCIA

Como cualquier aparato eléctrico, este masajeador se debe utilizar con precaución y cuidado para evitar una electrocución.

Por lo tanto, no use el aparato

- si la tensión de red no es la indicada en el aparato,
- si el aparato o el accesorio presentan daños visibles,
- nunca durante una tormenta.

En caso de defectos o de fallos de funcionamiento, apague inmediatamente el aparato y desconéctelo. Nunca tire del cable de corriente o del aparato para desconectar el enchufe del tomacorriente. Nunca sostenga o transporte el aparato por el cable de alimentación. Mantenga los cables alejados de superficies calientes. Nunca abra el aparato.

Asegúrese de que el aparato de masaje, el interruptor, el enchufe y el cable no entren en contacto con agua, vapor u otros líquidos.

Por lo tanto, use el aparato

- en habitaciones interiores secas (p. ej., nunca en la bañera o la sauna).
- solamente con las manos secas

No tire, tuerza o doble el cable de electricidad. No pinchar con agujas ni con otros objetos agudos. Tenga cuidado de no tirar del cable ni de colocarlo sobre objetos afilados o puntiagudos. Nunca intente coger un aparato eléctrico que haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente. No utilice el aparato ni sus accesorios si estos presentaran daños visibles.

No exponga el aparato a golpes y no lo deje caer.



Reparaciones ADVERTENCIA

Las reparaciones de aparatos eléctricos deben ser llevados a cabo exclusivamente por personal especializado. Las reparaciones llevadas a cabo incorrectamente, pueden conducir a considerables peligros para el usuario. Si tiene alguna pregunta, diríjase al servicio posventa de Top Life. Si cable se daña, la sustitución debe realizarla un distribuidor autorizado.

Riesgo de incendio



ADVERTENCIA

¡Si el aparato no se utiliza de acuerdo con la finalidad especificada o no se observan las presentes instrucciones existe peligro de incendio! Por lo tanto, no use el masajeador

- ☐ sin vigilancia, especialmente cuando haya niños en la proximidad
- ☐ nunca debajo de una cubierta, como p.ej. manta, cojín, ...
- ☐ nunca cerca de gasolina u otras sustancias fácilmente inflamables.




Manipulación CUIDADO

El aparato se deberá apagar en el interruptor principal y desenchufar después de cada utilización y antes de cada limpieza.

- ☐ La superficie del aparato se calienta. Las personas que no son sensibles al calor, deben tener especial cuidado al utilizar este aparato.
- ☐ No colocar objetos en las aperturas del aparato ni en las piezas giratorias o móviles. Observar que las partes móviles del aparato siempre puedan moverse libremente.
- ☐ **Nunca coloque todo su peso en las piezas móviles del aparato. Nunca utilice el aparato de pie. Nunca coloque ningún objeto sobre el aparato.**
- ☐ Proteja el aparato de temperaturas altas.

7. Descripción del aparato

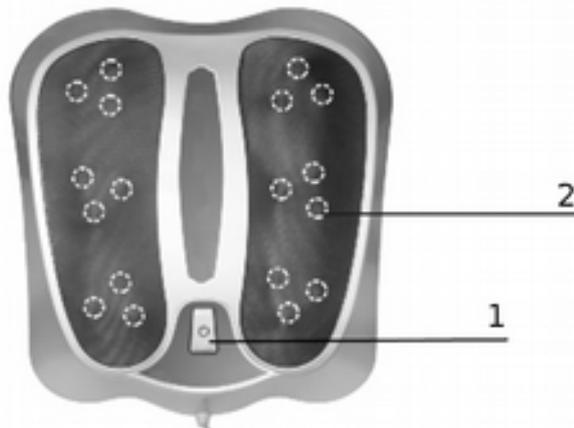

1. Botón ON/CALOR/OFF. Presione una vez para encender, una vez para pasar a la función térmica, una tercera vez para apagarlo.
2. Cabezales de masaje (18 en total)

8. Puesta en servicio

- ☐ Desembale el aparato.
- ☐ Verifique que el aparato, el conector y el cable no presenten daños.
- ☐ Conecte el aparato.
- ☐ Acomode el cable de modo que nadie pueda tropezar.

9. Utilización

Retírese los zapatos antes de cada uso. Una vez que se siente confortable, coloque sus pies sobre los cabezales.

Encienda el aparato con el botón On/Off. Para activar la función térmica pulse de nuevo la tecla On/Off. Para apagar el aparato, vuelva a pulsar la tecla On/Off.

El masaje debería percibirse en todo momento como agradable y relajante. Interrumpa el masaje, cambie la posición del aparato o reduzca la presión, si el masaje le resulta doloroso desagradable.

Importante

Utilice el masajeador por un tiempo máximo de 15 minutos. Con un masaje más largo, el estímulo excesivo de los músculos puede causar tensiones en lugar de relajación.

El masaje en un punto determinado de la planta del pie puede repercutir en los órganos del cuerpo correspondientes. Sin embargo, antes del masaje en los puntos reflejos del pie, se recomienda informarse en libros y consultar al médico para conseguir el efecto deseado.

Para evitar algún daño, el aparato se apaga automáticamente si se usa de manera prolongada o si se recalienta (seguridad anti sobrecalentamiento). Cuando los cabezales se detienen, desconecte el aparato y deje enfriar de 20 a 30 minutos. Una vez enfriado, volverá a funcionar normalmente.

10. Cuidado y almacenamiento



Limpieza ADVERTENCIA

Desenchufe el aparato antes de cada limpieza.

Limpie el aparato únicamente de la manera indicada. Nunca debe penetrar líquido en el aparato o en los accesorios.

- Limpiar el aparato frotándolo con un paño levemente humedecido.
- Las manchas pequeñas pueden eliminarse con un paño o una esponja húmeda y, si es preciso, con un detergente líquido para ropa delicada. Para la limpieza nunca utilice detergentes que contengan disolventes.
- Espere a que el aparato esté completamente seco antes de volverlo a usar.

Almacenamiento

Si no tiene previsto utilizar el aparato durante un período prolongado, le recomendamos guardarlo en la caja original, en un ambiente seco y sin colocar ningún peso encima.

11. ¿Qué hacer en caso de problemas?

Problema	Causa	Solución
Los cabezales de masaje rotan lento	Cabezales de masaje sometidos a una gran carga.	Libere los cabezales del peso.
Los cabezales de masaje no se mueven.	Aparato no está conectado.	Enchufe el conector y encienda el aparato.

Los cabezales de masaje se detuvieron abruptamente	La seguridad anti sobrecalentamiento se activó	Desconecte el aparato, espere de 20 a 30 minutos para que se enfríe y vuelva a encenderlo.
--	--	--

12. Eliminación

Deseche el aparato según la Directiva europea WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) respecto a los aparatos eléctricos y electrónicos usados.

