


# **APPARECCHIO PER MASSAGGIO AI PIEDI CON RISCALDAMENTO A INFRAROSSI**

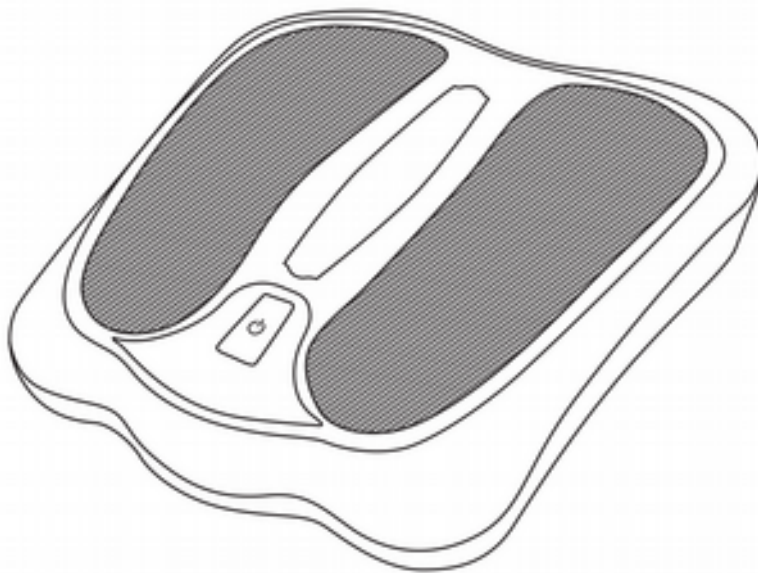

## **MANUALE DI ISTRUZIONI**

**CE**

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto uno dei prodotti Top Life. La nostra filosofia è offrire articoli che ogni giorno migliorino il benessere e la salute di chi li usa.

La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle, conservando questo manuale per metterlo a disposizione di altri utenti.

Cordialmente,  
Il team di Top Life



### **Avviso**

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con deficit fisici, sensoriali o mentali e da persone con poche conoscenze ed esperienze specifiche, a condizione che siano sorvegliati o sappiano come utilizzarlo in tutta sicurezza e consapevoli dei rischi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.
- Il cavo di alimentazione elettrica non può essere sostituito. In caso di danneggiamento, l'apparecchio deve essere smaltito.
- Non inserire alcun oggetto nelle fessure dell'apparecchio e nelle sue parti mobili. Assicurarsi che le parti mobili siano sempre libere da ostacoli.
- Non incastrare o inserire nessuna parte del proprio corpo, soprattutto le dita, tra gli elementi massaggianti mobili dell'apparecchio o nel relativo supporto.

## **Sommario**

- 1. Contenuto della confezione**
- 2. Spiegazione dei simboli**
- 3. Informazioni sul massaggio shiatsu**
- 4. Presentazione dell'apparecchio**
- 5. Utilizzo conforme alle istruzioni**
- 6. Avvertenze di sicurezza**
- 7. Descrizione dell'apparecchio**
- 8. Disimballaggio e controllo dell'apparecchio**
- 9. Utilizzo**
- 10. Manutenzione e custodia**
- 11. Cosa fare in caso di problemi?**
- 12. Smaltimento**

### **1. Contenuto della confezione**

- Apparecchio per massaggio shiatsu ai piedi
- Il presente manuale di istruzioni (versione 1)

## 2. Spiegazione dei simboli



L'apparecchio è dotato di un doppio isolamento di protezione e corrisponde alla classe di protezione 2.

È conforme alle direttive dell'Unione Europea RoHS 2.0 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU e LVD 2014/35/EU.

## 3. Informazioni sul massaggio shiatsu

Lo shiatsu è una forma di massaggio corporeo sviluppata in Giappone un secolo fa. Questo metodo coniuga alla base le nozioni della medicina cinese e il sistema dei canali energetici (o meridiani) del corpo umano.

L'obiettivo è favorire il benessere fisico, emotivo e mentale di chi si sottopone al massaggio.

## 4. Presentazione dell'apparecchio

Questo apparecchio è dotato di 18 teste massaggianti che con il loro movimento rotatorio imitano gli stessi movimenti di un massaggio shiatsu tradizionale.

L'apparecchio è previsto esclusivamente per un uso personale e non a fini medici o commerciali.

## 5. Utilizzo conforme alle istruzioni

Questo apparecchio è destinato al massaggio ai piedi. Non utilizzare l'apparecchio nei casi riportati nell'elenco sottostante. In caso di incertezza sull'idoneità dell'apparecchio massaggiante consultare il proprio medico.

## 6. Avvertenze di sicurezza

Non utilizzare l'apparecchio massaggiante:

- in presenza di condizioni patologiche o di lesioni ai piedi (ferite aperte, verruche, micosi);
- su bambini di età inferiore a 8 anni;
- su animali;
- **per più di 15 minuti (leggere il capitolo 9)**

Questo apparecchio non è adatto a essere utilizzato da persone (bambini inclusi) aventi capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza esperienza e conoscenze specifiche, a meno che non vengano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o che abbia illustrato l'utilizzo dell'apparecchio.

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito. I bambini non devono essere lasciati senza sorveglianza per evitare che giochino con l'apparecchio.

Prima di utilizzare l'apparecchio massaggiante, consultare un medico:

- in caso di incertezza sull'idoneità personale dell'apparecchio;
- in presenza di patologie gravi o in seguito a un'operazione ai piedi;
- in presenza di diabete e trombosi;
- in presenza di disturbi alle gambe e/o ai piedi (varici, trombosi venose);

- in presenza di dolori di natura sconosciuta.

L'apparecchio è previsto unicamente per lo scopo riportato nel presente manuale di istruzioni. Il produttore e l'importatore non rispondono di danni causati da un utilizzo scorretto o inappropriato.

**AVVISO**

Non lasciare l'imballaggio alla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.

**Rischio di scosse elettriche****AVVISO**

Come ogni dispositivo elettrico, questo apparecchio massaggiante deve essere utilizzato con prudenza e accortezza per evitare il rischio di scosse elettriche.

Di conseguenza non utilizzare

- con una tensione di rete diversa da quella indicata sull'apparecchio;
- mai l'apparecchio o i suoi accessori se presentano danni evidenti;
- mai durante un temporale.

In caso di difetti o malfunzionamenti spegnere l'apparecchio e scollegare immediatamente il cavo. Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per scollegarlo dalla presa di corrente. Non reggere o trasportare mai l'apparecchio per il suo cavo di alimentazione. Allontanare cavi di alimentazione da superfici calde. Non aprire mai l'apparecchio.

Fare attenzione che l'apparecchio massaggiante, l'interruttore, la presa e il cavo di alimentazione non entrino mai in contatto con acqua, vapore o altri liquidi.

Di conseguenza utilizzare l'apparecchio

- esclusivamente al chiuso, lontano da ambienti umidi (bagno, sauna);
- esclusivamente con le mani asciutte.

Fare attenzione che il cavo di alimentazione non venga mai tirato, storto o piegato. Non infilare mai aghi o altri oggetti appuntiti al suo interno. Fare attenzione che il cavo di alimentazione non venga mai appoggiato su oggetti taglienti o appuntiti. Non afferrare in alcun caso un apparecchio caduto in acqua: scollegarlo immediatamente. Non utilizzare l'apparecchio o i suoi accessori se presentano danni visibili.

Evitare di scuotere l'apparecchio e di lasciarlo cadere.

**Riparazioni****AVVISO**

Le riparazioni dei dispositivi elettrici devono essere effettuate esclusivamente da elettricisti qualificati. Le riparazioni non conformi possono comportare gravi rischi per chi utilizza il dispositivo. Per ogni domanda rivolgersi al servizio clienti Top Life.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire da un elettricista qualificato.

**Rischio d'incendio****AVVISO**

Un utilizzo scorretto dell'apparecchio e il mancato rispetto del presente manuale di istruzioni in certi casi possono provocare un incendio! Di conseguenza non utilizzare mai l'apparecchio massaggiante:


- senza sorveglianza, soprattutto in presenza di bambini;
- sotto una coperta, un cuscino ecc.;
- in prossimità di essenze o altri materiali facilmente infiammabili.

### **Manipolazione** **ATTENZIONE**

L'apparecchio deve essere spento e scollegato grazie all'interruttore principale dopo ogni utilizzo e prima di essere pulito.

- La superficie dell'apparecchio è calda. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione al momento dell'utilizzo.
- Non infilare alcun oggetto nelle fessure o nelle parti rotanti. Fare attenzione che le parti rotanti possano muoversi sempre senza ostacoli.
- **Non appoggiarsi con tutto il proprio peso sulle parti mobili dell'apparecchio. Mai utilizzare l'apparecchio in caso di stanchezza eccessiva. Non posare alcun oggetto sull'apparecchio.**
- Tenere l'apparecchio lontano da temperature elevate.

## 7. Descrizione dell'apparecchio

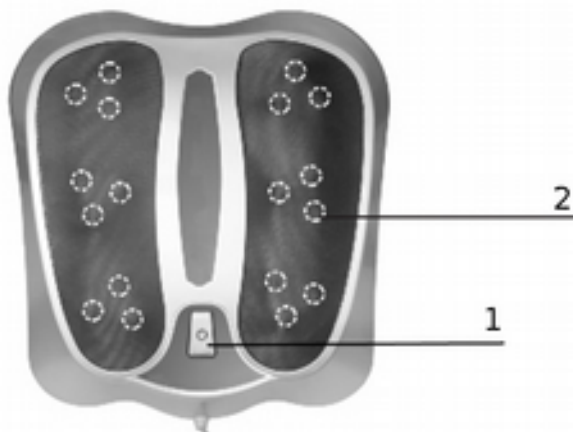

1. Pulsante ON/CALORE/OFF. Premere una volta per accendere l'apparecchio, una seconda volta per attivare la funzione riscaldante e una terza volta per spegnere l'apparecchio.
2. Teste massaggianti (18 in tutto)

## 8. Disimballaggio e controllo dell'apparecchio

- Estrarre l'apparecchio dalla confezione.
- Verificare che l'apparecchio, la presa e il cavo di alimentazione non presentino danni.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente.
- Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non sia di ostacolo.

## 9. Utilizzo

Togliere le scarpe prima di ogni utilizzo. Dopo essersi accomodati, poggiare i piedi sulle teste massaggianti.

Accendere l'apparecchio con il pulsante On/Off. Per attivare la funzione riscaldante premere nuovamente il pulsante On/Off. Premere ancora il pulsante On/Off per spegnere l'apparecchio.

L'utilizzo di questo apparecchio è pensato per essere piacevole e rilassante. Se l'utilizzo è doloroso o spiacevole spegnere l'apparecchio oppure cambiare la sua posizione.

### **Importante**

**Utilizzare l'apparecchio massaggiante per non più di 15 minuti.** Se il massaggio dura più a lungo, una stimolazione muscolare eccessiva potrebbe provocare la contrazione dei muscoli invece di rilassarli.

Il massaggio di un punto particolare della pianta del piede può avere un effetto sull'organo del corpo corrispondente. Per questo motivo, prima di effettuare il massaggio di riflessologia plantare, è consigliabile documentarsi e consultare un medico per ottenere l'effetto desiderato.

**Per evitare che si danneggi, l'apparecchio si spegne automaticamente se viene utilizzato per una durata prolungata e comincia a riscaldarsi (sicurezza contro il surriscaldamento).** Quando le teste massaggianti smettono di girare, scollegare il cavo di alimentazione e lasciarlo raffreddare per 20-30 minuti. Una volta raffreddato riprenderà a funzionare normalmente.

## **10. Manutenzione e custodia**



### **Pulizia AVVISO**

- Prima di ogni pulizia scollegare l'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio solamente nel metodo indicato. Non devono mai penetrare liquidi all'interno dell'apparecchio o nei suoi accessori.
- Pulire l'apparecchio con un panno leggermente umido. In caso di sporcizia è possibile utilizzare un panno leggermente imbevuto di detersivo o sapone.
- Le piccole macchie possono essere eliminate utilizzando una salvietta o una spugna umida con una piccola quantità di detersivo per capi delicati. Mai utilizzare prodotti che contengono solventi.
- Aspettare che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.

### **Custodia**

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo è consigliabile conservarlo nella confezione originale in un luogo secco, senza poggiare oggetti sopra la confezione.

## **11. Cosa fare in caso di problemi?**

| <b>Problema</b>  | <b>Causa</b>  | <b>Soluzione</b>  |
|--|---|---|
| Rotazione delle teste massaggianti rallentata.         | Le teste massaggianti sono sottoposte a uno sforzo eccessivo. | Sgomberare ogni possibile ostacolo per le teste massaggianti.                           |
| Le teste massaggianti non si muovono.                  | Apparecchio non collegato.                                    | Collegare la presa e accendere l'apparecchio.   |
| Le teste massaggianti si sono fermate improvvisamente. | Si è attivata la sicurezza contro il surriscaldamento.        | Scollegare l'apparecchio, attendere per 20-30 minuti che si raffreddi, poi riattivarlo. |

## 12. Smaltimento

Smaltire l'apparecchio in modo conforme alla direttiva dell'unione europea – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relativa agli apparecchi elettrici ed elettronici usati.

